

Meditera®



İnfüzyon Pompa Sistemleri

Tek Setle Çift İnfüzyon



Tek Setle Çift İnfüzyon

Güvenli ve Ekonomik İnfüzyon Sistemleri

2 Set Yerine 1 Set

Çift kanallı infüzyon sistemlerimizin tek setle çift infüzyon verebilme özelliği kurumlara ekonomik ve pratiktir.

Bu özelliği setimizi yoğun bakım, onkoloji, pediatri ve neonatal gibi kritik ünitelerin alternatifsiz seçeneği haline getirmektedir.

Seti Ayırmadan Hava Boşaltımı

Pompa sistemlerimizi eşsiz kılan Patentli “Kaset” Sisteminin hava hapsedme odası, seti sistemden ve hastadan ayırmadan hava boşaltmaya olanak sağlar.

Kaset sistemi üzerinde 2 ml hacminde hava hapsedme odası mevcuttur. Hava alarmlarını minimuma indiren bu sistem enfeksiyon riskini azaltır. Hastane enfeksiyonuna bağlı tedavilerden, zamandan ve işgücünden tasarruf sağlar.

48 Saat Sorunsuz Kullanım

Patentli “Kaset” mekanizması sayesinde set, ezilerek kullanılmadığı için 48 saat süresince deforme olmadan, (gönderim doğruluk oranını saptırmadan) sorunsuz kullanılır.

Yükseklik Bağımsız Çalışma Doğru Gönderim


Patentli “Kaset” sistemi üstün mekaniği ile pompanın hastaya göre yüksekliğinden bağımsız olarak her konumda doğru ve güvenli sıvı gönderimi sağlar.

PATENTLİ “KASET” SİSTEMİ

- TEK SETLE ÇİFT İNFÜZYON
- 48 SAAT SORUNSUZ KULLANIM
- SETİ HASTADAN AYIRMADAN HAVA BOŞALTIMI
- YÜKSEKLİK BAĞIMSIZ ÇALIŞMA, DOĞRU GÖNDERİM
- KULLANICI DOSTU-EN AZ HATA PAYI, EN AZ ZAMAN KAYBI

ICU Medical 100 yıla dayanan medikal ve farmasötik tecrübesini etkin ve deneyimli satış, pazarlama ve teknik servis personeli ile birleştiren Meditera; ihtiyaçlarınıza uygun, verimli, güvenli ve ekonomik çözümleri kullanımınıza sunmaya devam ediyor.

Uzun vadeli çözüm ortağınız Meditera, dünyadaki en iyi infüzyon pompa sistemlerini en avantajlı koşullarda kullanımınıza sunuyor. Patentli teknolojisi ile güvenli, tek pompa setinde çift infüzyon olanağı ile ekonomik pompa ve set seçeneklerimiz, sağlık kurumunuzun infüzyon ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayacak çeşitliliktedir.

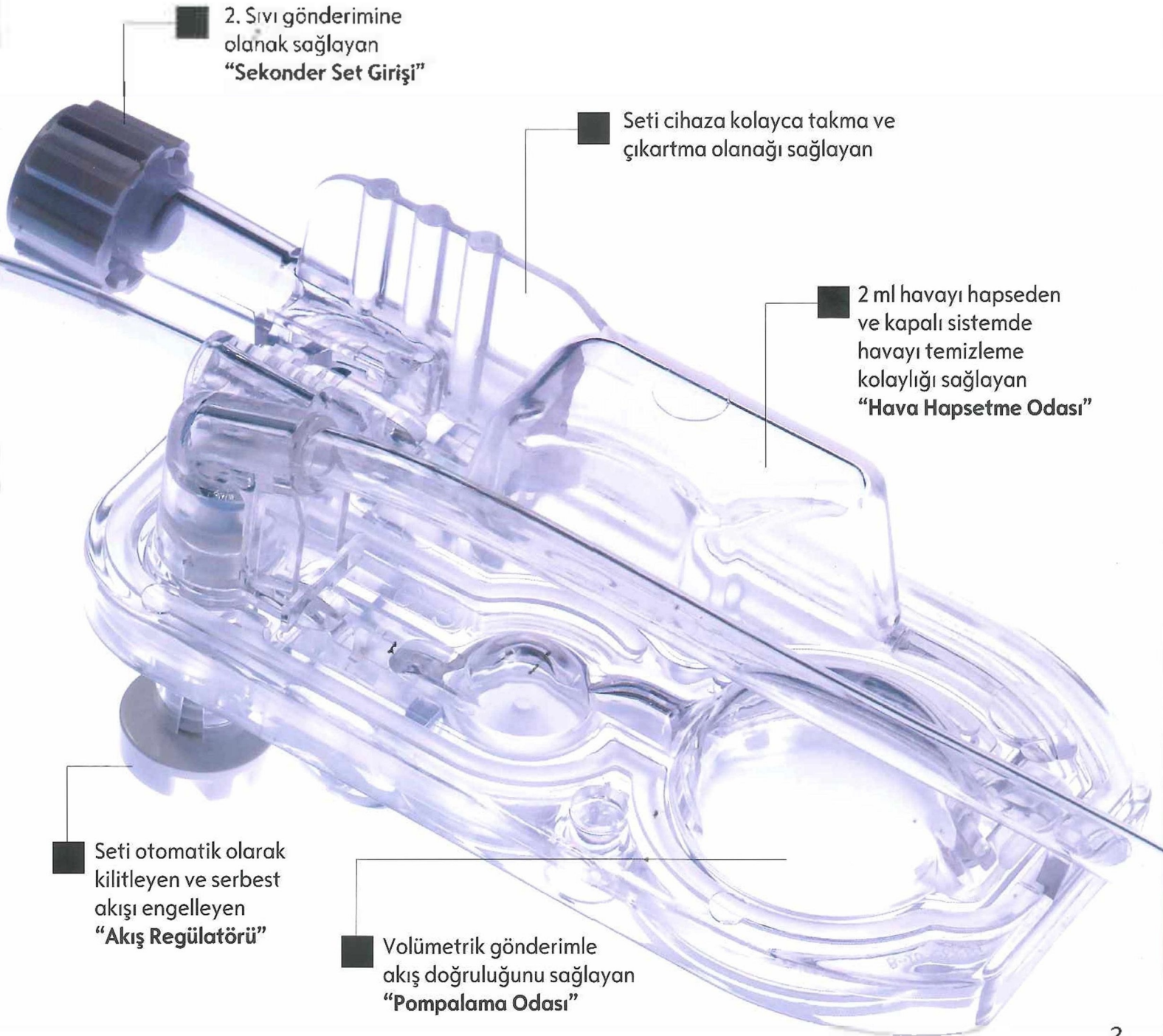


Kasetli Pompa Seti Çeşitliliği

ICU Medical İnfüzyon Pompa Setleri

- Pompa setlerimiz, patentli “Kaset Sistemi” sayesinde kesin, doğru ve sürekli infüzyon ile güvenli sıvı tedavisi sağlar.
- Kaset mekanizmasının sekonder set girişi kemoterapötik, antibiyotik vb. tüm intravenöz sıvıların ikinci yoldan infüzyonuna olanak sağlar. Böylece tek setle 2 ayrı sıvı aynı anda veya ardışık olarak ve farklı dozlarda gönderilebilir
- Pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenen ve serbest akışa izin vermeyen akış regülatörü sayesinde kontrol dışı serbest akım riski yoktur.
- Kapalı sistem sayesinde enfeksiyon riski minimumdur.
- Pompa setlerimiz farklı kullanım alanları için aynı pompada kullanılabilecek çeşitliliğe sahiptir.
- Pompalarımız ve setleri, ülke çapında uzman kadrosuyla hizmet veren, ISO ve TSE belgeli Teknik Servis Ekibimizin güvencesi altındadır.



Referans Katalog Numarası	Etiket Adı Adı
14000	Birincil PLUM™ Set, Gözlem Haznesinde 15 Mikron Filtre, Önceden Delinmiş Y-Giriş Bölgesi
14006	Birincil PLUM™ Set, Gözlem Haznesinde 15 Mikron Filtre, Polietilen Astarlı Işığa Dayanıklı Tüp, Distal Mikro Borulu Tüp
14009	Birincil PLUM™ Set, gözlem haznesinde 15 mikron filtre, ikinci giriş CLAVE™ konnektör, 0,2 mikron filtre, CLAVE™ Y-giriş, polietilen astarlı ışığa dayanıklı tüp, distal mikro borulu tüp
14241	Birincil PLUM™ Set, Gözlem Haznesinde Bilyeli Çek Valf, 15 Mikron Filtre, Polietilen Astarlı Işığa Dayanıklı Tüp, Distal Mikro Borulu Tüp
14212	Birincil PLUM™ Y-Tipi Kan Seti, 200 Mikron Filtre, CLAVE™ Konnektörlü İkincil Giriş, Havalandırmaz


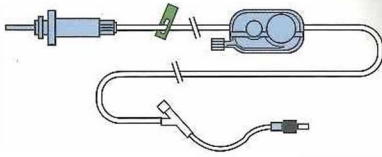


14000 - Standart Çiftli İnfüzyon pompa seti

1 ml : 20 damla
Uzunluk : 272 cm
Total set dolum hacmi : 18.5 ml
Lateks içermez

14006 - Işıktan Korumalı Çiftli İnfüzyon Pompa Seti

1 ml : 20 damla
Uzunluk : 272 cm
Total set dolum hacmi : 19 ml
Lateks içermez

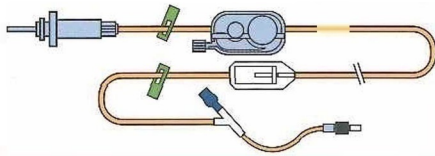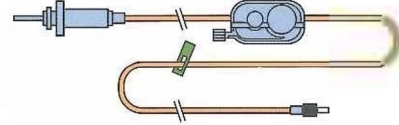



14009 - Işıktan Korumalı Çiftli İnfüzyon Pompa Seti, 0,2 mikron Filtreli

1 ml : 20 damla
Uzunluk : 261 cm
Total set dolum hacmi : 15 ml
Lateks içermez

14212 - Kan Seti

Kan ve kan bileşenlerinin infüzyonuna uygun pompa seti

1 ml : 15 damla
Uzunluk : 279 cm
Total set dolum hacmi : 49 ml
Lateks içermez

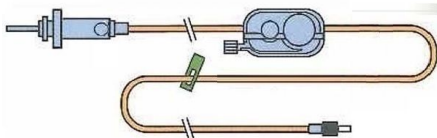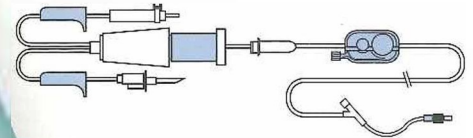

14241 - Işıktan Korumalı Çiftli İnfüzyon Pompa Seti, 0,2 mikron Filtreli

1 ml : 20 damla
Uzunluk : 272 cm
Total set dolum hacmi : 12 ml
Lateks içermez

Çift Yollu İnfüzyon Pompaları

Hospira infüzyon pompalarının en büyük özelliği tek setle çift kanallı volümetrik sıvı gönderimini hassas ve yüksek doğrulukta yapmasıdır.

- Büyük veya küçük hacimli sıvıların IV gönderimlerinde kullanılır.
- Hassas ve doğru gönderimin önemli olduğu tüm servislerde yaygın olarak kullanılır:
- Yoğun bakım • Onkoloji • Ameliyathane • Neonatal / Yeni doğan



PLUM 360

- Gelişen infüzyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, çok fonksiyonlu çift kanallı infüzyon pompası
- Farklı programlama ile;
- *Tek setle eş zamanlı (Concurrent) infüzyon
- *Tek setle ardışık (Piggyback) infüzyon
- Hız, doz ve zaman parametrelerinden istenilen iksini kullanarak programlama
- Makro ve mikro seçeneklerinin otomatik olarak bir arada kullanımı
- Terapi hesaplama özelliği;
- Doz hesaplama (Dose calculation)
- Yükleme dozu (Loading dose)
- 10 adıma kadar çoklu adım programlama (Multistep programming)
- İlaç listesi (Drug Library)
- Gönderim sırasında titrasyon yapabilme (hızın, dozun veya sürenin artırılıp / azaltılabilmesi) özelliği
- Gecikmeli başlatma özelliği (Delayed start)
- Kolay programlama seçenekleri, yönlendirici menüsü ve ile kolay kullanım
- Mednet sistemi ile tüm pompaların tek merkezden yönetilmesi

Uyarılar ve Önlemler

Pompalardan maksimum verimi alabilmek için;

- Mekanizma kısmına sıvı kaçmamasına özen gösterilmelidir.
- Tüm önlemlere rağmen mekanizmaya sıvı kaçması durumunda kuru bir bez veya pamuklu çubukla ulaşılabilen kısımlar temizlenebilir.
- Pompaların dış yüzey temizliği rutin olarak yapılmalıdır.
- Pompa mümkünse her zaman fişte takılı olmalıdır. Bu uygulama batarya ömrünü uzatır.
- Pompa setleri 48 saat süre ile kullanıma uygundur. Setler sağlık kurumunun hijyen protokollerine uygun olarak değiştirilmelidir.



DİKKAT!
SEKONDER GİRİŞE
ENJEKTÖR VEYA İKİNCİ
SIVIYI TAKMADAN ÖNCE,
MUTLAKA PRİMER HATTAKİ
KLEMPİ KAPATINIZ.



DİKKAT!
MEKANİZMAYI ASLA
ALKOL İÇERİKLİ
MALZEMELERLE
TEMİZLEMİYİN.

MEDİTERA SAHA SATIŞ EKİBİ; İNFÜZYON SİSTEMLERİMİZ, POMPA VE SETLERİN KULLANIMI İLE İLGİLİ EĞİTİMLER DÜZENLEYEREK KULLANICI SAĞLIK PERSONELİNİZİN VE KURULUMUNUZUN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA ÖZEN GÖSTERMEKTEDİR.

ISO 9001:2000 BELGESİ; TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ; SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ'NE SAHİP TEKNİK SERVİSİMİZ POMPA İLE İLGİLİ SORUNLARINIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SAHA SATIŞ EKİBİMİZ İLE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

Meditera[®]
Sağlıkta 30. Yıl

İşimiz sizinkini kolaylaştırmak

Meditera

Merkez: 5758 Sk. No: 4/C Karabağlar-İzmir
Tel: 0232 237 59 49 (Pbx) Faks: 0232 253 94 04
www.meditera.com.tr • info@meditera.com.tr